


Церам-Бонд

Готовая к использованию сверхтонкая прослойка между металлом и керамикой

Наружные поверхности металла тщательно очищают и мягкой кисточкой наносят один слой Церам-Бонда равномерной толщины.



После обжига цвет Церам-Бонда становится светло-желтым. Это позволяет уменьшить толщину обожжённого слоя.

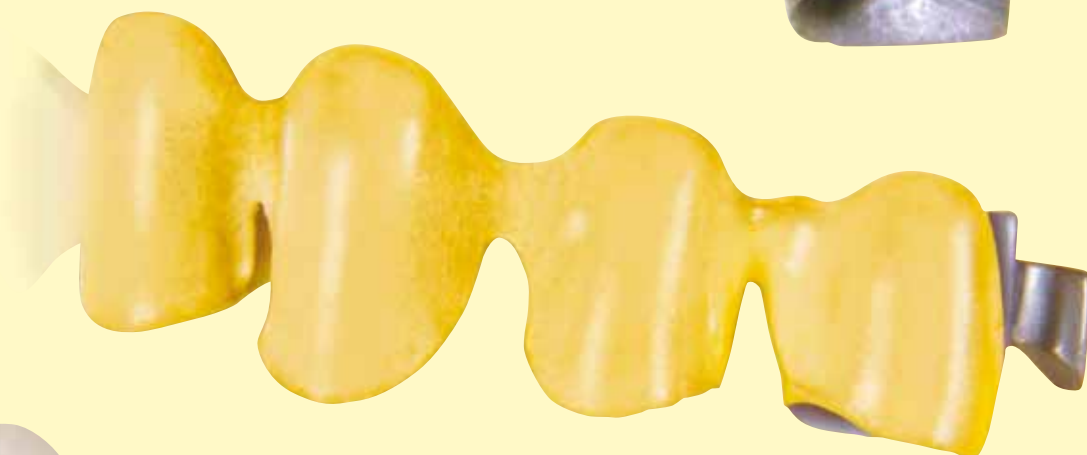

Церам-Бонд подходит для всех зубопротезных сплавов. Даже на неблагородных легированных сплавах можно запекать керамику.

Церам-Бонд действует как амортизатор при различных коэффициентах термического расширения металла и керамики. Внутренние напряжения между металлом и керамикой становятся значительно меньше.



Церам-Бонд
7 гр
REF 520 0032 3

Церам-Бонд
30 гр
REF 520 0032 2



Эргономичный шпатель для работы с ВОСКОМ

Моделировочный шпатель для полного съёмного протезирования

Объединяет различные инструменты в одном, вследствие чего отпадает необходимость в смене инструментов и повышается скорость и эффективность обработки восковой моделировки. Эргономично разработанная ручка предназначена для работы как правой, так и левой рукой.

Глубокой ложкой можно быстро и точно наносить большое количество воска.

Остро заточенная кромка ложки облегчает моделировку альвеолярной области.

Специальная заточка острия лезвия шпателя позволяет просто и быстро моделировать специфическую форму межзубных сосочков с учётом возрастных особенностей.

Натуральная величина

Целенаправленное быстрое нанесение воска сокращает время на финишное моделирование межзубных промежутков

Изогнутая по плоскости конфигурация ложки создаёт непрерывные и чистые переходы к функциональной кромке и позволяет идеально её оформить.



Восковая моделировка легко и быстро выполняется с использованием эргономичного шпателя и приобретает очень естественный вид.



Эргономичный шпатель
REF 310 0001 3