

mould chart

Classic

CE






 *Wiedent*

www.wiedent.com

	upper anterior	A	B	C
402		42,2	9,0	7,8
421		42,4	9,7	7,9
431		44,0	9,4	8,0
437		45,0	10,3	8,5
441		44,8	8,5	8,4
461		46,0	10,1	8,9
471		48,0	11,2	8,8
480		47,0	9,4	8,4
481		47,0	10,9	8,9
507		50,0	10,5	9,4

	upper / lower posterior 0°- 9°	A	B
14 U		30,6	9,4
14 L		31,8	8,5
16 U		31,4	9,6
16 L		33,2	9,2
33 U		31,6	8,7
33 L		33,2	8,8
36 U		31,8	8,6
36 L		34,2	8,2

	upper / lower posterior 20°- 23°	A	B
52 U		28,2	8,1
52 L		30,6	7,3
54 U		29,7	8,6
54 L		32,0	7,7
55 U		31,9	8,6
55 L		33,9	7,9
57 U		32,5	9,9
57 L		36,2	8,4

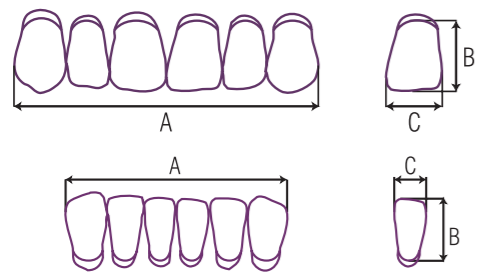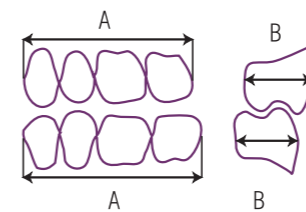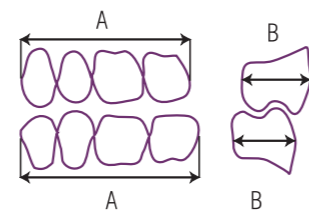

	lower anterior	A	B	C
635		34,5	8,7	5,1
636		35,7	10,0	5,6
637		37,3	9,3	6,0
733		34,7	8,2	5,2

articulation combination chart		
402	733	14, 33
421	635, 733	14, 33
431	635, 733	14, 33
437	635, 636	33, 36
441	635, 733	33, 36
461	635, 636	16, 36
471	635, 636	16
480	635, 636	16
481	636, 637	16, 36
507	636, 637	16, 36

articulation combination chart		
402	733	52, 54
421	635, 733	52, 54
431	635, 733	54, 55
437	635, 636	54, 55
441	635, 733	54, 55
461	635, 636	55
471	635, 636	55
480	635, 636	55
481	636, 637	55, 57
507	636, 637	57



Oferowane w 9 uniwersalnych kolorach
 Available in 9 universal shades
 Доступные в 9-ти цветах универсальной шкалы
 A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, C2, C3, D3

Zęby akrylowe **CLASSIC**
do protez zębowych

PL

Zęby akrylowe **CLASSIC**, dwuwarstwowe i z efektem fluorescencyjnym są przeznaczone do wykonywania ruchomych protez zębowych. Charakteryzują się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie dzięki zastosowaniu do ich produkcji wysoce usieciowanych akryli. Gama fasonów oferowana w dziewięciu kolorach uniwersalnego wzorca umożliwia wykonanie różnorodnych uzupełnień protetycznych. Okrągłe wgłębienia w zębach bocznych zapewniają bardzo dobrą przyczepność do płyty protezy. Zęby **CLASSIC** spełniają wymagania międzynarodowych norm PN-EN ISO 22112 i PN-EN ISO 7491.

CLASSIC
acrylic teeth for dentures

GB

CLASSIC two-layer acrylic teeth which have fluorescent effect have been designed for use in removable prosthetic dentures. Manufactured from highly cross-linked acrylics they have extra hardness and abrasion resistance. A range of moulds offered in nine universal shades enables making dentures to meet different patient's demands. In order to ensure a good bonding of a tooth to the denture base posterior teeth have a round cavity. **CLASSIC** teeth meet the requirements of the international standards EN ISO 22112 and EN ISO 7491.

Акриловые зубы **CLASSIC**
для зубных протезов

RU

Двухслойные, с флюоресцентным эффектом, акриловые зубы **CLASSIC** предназначены для зубных съемных протезов. Характеризуются повышенной твердостью и устойчивостью к стиранию, благодаря применению при их производстве высококачественных перекрестно связанных акрилов. Гамма фасонов в девяти цветах универсальной шкалы делает возможным дополнения разнообразных потерь зубов пациентов. Круглые углубления, которые имеют боковые зубы, обеспечивают очень хорошее соединение зубов с массой протезных пластинок. Зубы **CLASSIC** отвечают требованиям международных норм EN ISO 22112 и EN ISO 7491.



Poland, 94-104 Łódź
ul. Obywatelska 187/189



tel. + 48 42 640 48 70
tel. + 48 42 640 40 12
fax + 48 42 688 33 84
office@wiedent.com.pl